


DENBA^H Health スタンダード使い方ガイド

ご使用前にこの使い方ガイドをよくお読みの上、正しくご使用ください。
また、読み終わった後も大切に保管してください。


セット内容 ご使用前に、必要なものが揃っているかご確認ください。



①DENBA本体

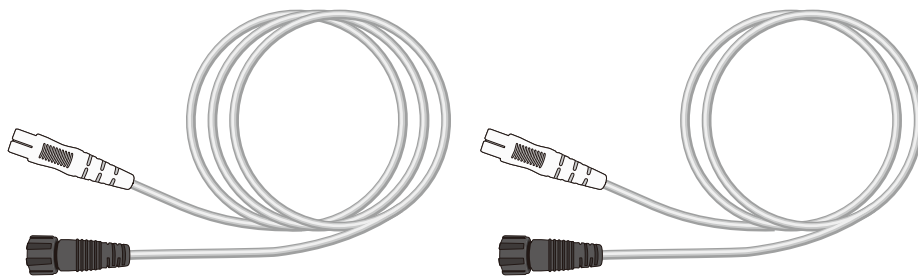


②コード2本(2m/5m)

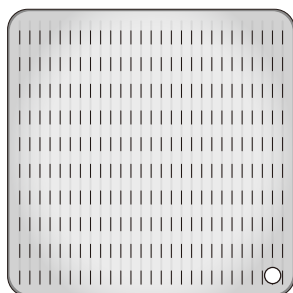


③マット大

(W1200mm×D1200mm×H10mm)

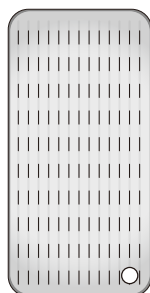

④マット中

(W600mm×D1200mm×H10mm)

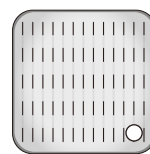

⑤マット小

(W500mm×D500mm×H10mm)

Q & A

DENBA^HHealthのよくある質問にお答えします!

Q1 DENBA^HHealthの低電位ってどの程度なの?

A DENBA^H Healthは2w(スタンダードの場合)の消費電力と約0.2mA出力電力のため、長時間、快適にご使用いただけます。

Q2 DENBA^HHealthと高電位の治療器の違いは?

A DENBA^H Healthは水分子を共振させ、空間全体に効果を発揮しますので、空間内で自由にお過ごしいただけるところが大きな違いです。

Q3 電位空間ってどのくらいの広さなの?

A マットを中心に4~5m、360度の大きな空間を作り出すことができます。コードの長さでの違いはほとんどありません。

Q4 子どもやペットがマットの上に乗っても大丈夫?

A 問題ありません。安心してお使いいただけます。ただし、医療用電子機器との併用は、影響を与える恐れがありますので使用しないでください。


1~5の順に進んでください

わかりやすい
動画でもご確認
いただけます。




1 コネクターの取り付け

DENBA本体背面のコネクタにコードの黒い方を差込んだら矢印の方向に回す。

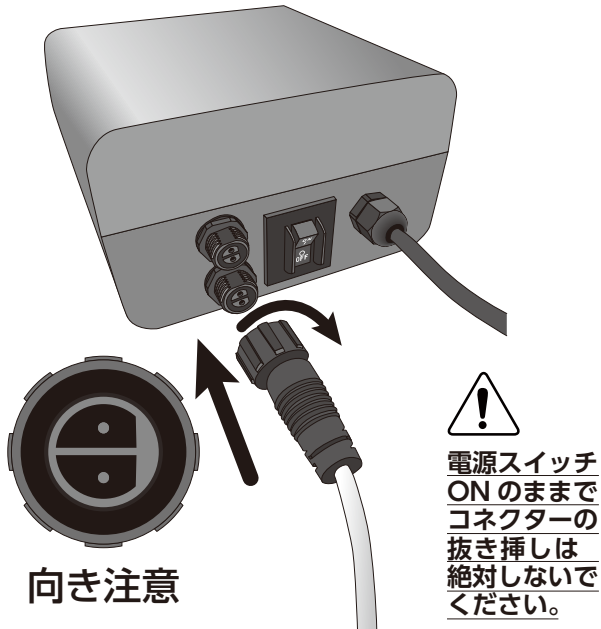


2 マットに接続

コードの白い方をマットの取り付け部に差し込む。

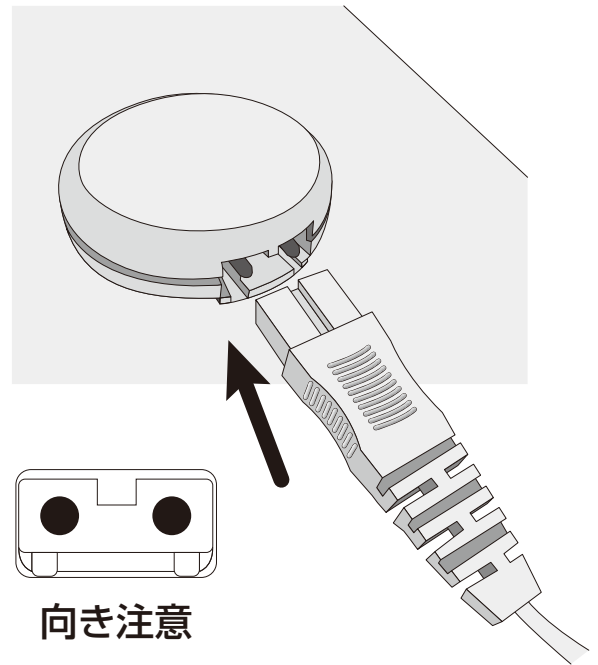


3 電源コードをコンセントに差し込む

手順1、2完了後DENBA本体から出ている電源コードをコンセントに差し込む。

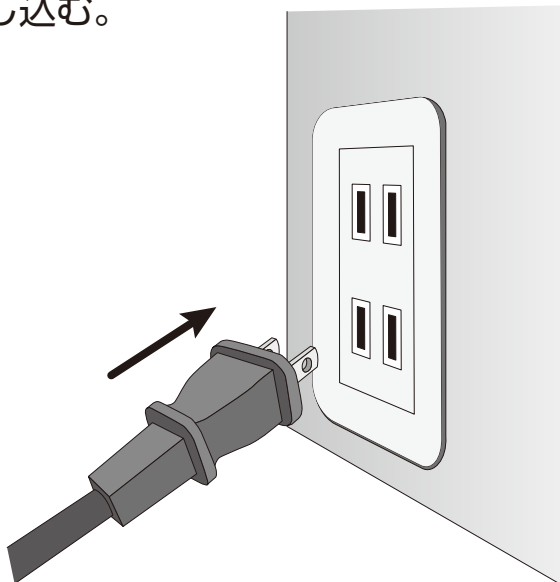

4 電源スイッチをONにする

手順3完了後DENBA本体背面にあるスイッチをONにする。

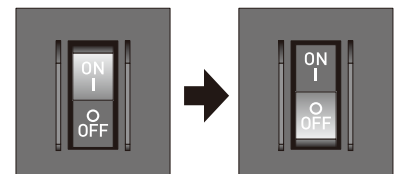

5 点灯を確認

前面パネルのDENBAロゴが青く点灯していればOK。

